

Хирургические дренажи и дренажные системы.

Канюля для хирургического отсоса, тип *Yankauer*. Код 5574

Канюля с отверстием для пальцевой регулировки отсоса. Двойная упаковка.
Fr 12-18-21: Длина 25см

Канюля для хирургического отсоса, тип *Yankauer*. Код 5575

Двойная упаковка.
Fr 12-18-21: Длина 25см

Дренаж хирургический длительного использования, техника *Redon*. Код 650

Прозрачный PVC дренаж с XRO линией,
перфорирован на протяжении 7см.
Маркировка – 12 см от дистального
кончика.

Fr 06-08-10-12-14-16-18: Длина 50см



Дренаж хирургический длительного использования, техника *Redon*. Код 651

Прозрачный PVC дренаж с XRO линией,
перфорирован на протяжении 14см.
Маркировка – 19 см от дистального
кончика.

Fr 06-08-10-12-14-16-18: Длина 50см.



Игла Алена Код 658

Код	Для введения дренажей под кодами	Длина мм
58.06	650.06	120
658.08	650/651.08	140
658.10	650/651.10	175
658.12	650/651.12	175
658.14	650/651.14	190
658.16	650/651.16	210
658.18	650/651.18	210



Соединительная трубка для бутылки *Redon* Код 659

Длина 125см PVC.

Код **659.10** для дренажей Redon 10 и 12 Fr

Код **659.14** для дренажей Redon 14 Fr

Код **659.16** для дренажей Redon 16 Fr

Код **659.18** для дренажей Redon 18 Fr

Red-O-Pack Код 620

Дренажная система для активного хирургического дренирования. (PE-PVC)

Код 620.05: Градуированный контейнер для аспирации 450мл жидкости. Предназначен для использования с соединительной трубкой код **660**.

Код 620.10: готовая дренажная система, состоящая из:

- 1 Red-O-Pack (код **620.05**)
- 1 соединительной трубки (код **660.12**)
- 2 дренажей (код **650.10**)
- 1 иглы Алена (код **658.10**)


Система также поставляется с дренажами Fr 12-14-16-18

Код 620.12: 2 дренажа Redon код **650.12**

Код 620.14: 1 дренажа Redon код **650.14**

Код 620.16: 1 дренажа Redon код **650.16**

Код 620.18: 1 дренажа Redon код **650.18**

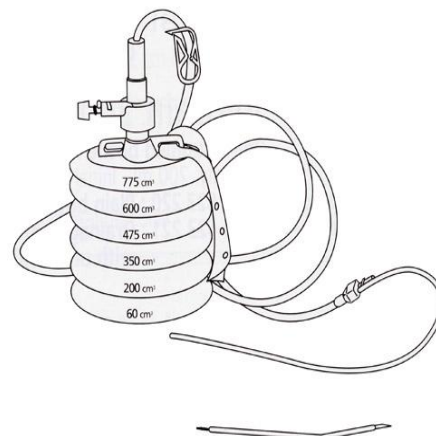


Мини Red-O-Pack Код 621

Дренажная система для активного хирургического дренирования.

Для послеоперационного дренирования небольших объемов (120 мл).

Код 621.06: в набор входит дренаж Redon Fr 06 и игла Алена.

Код 621.08: в набор входит дренаж Redon Fr 08 и игла Алена.

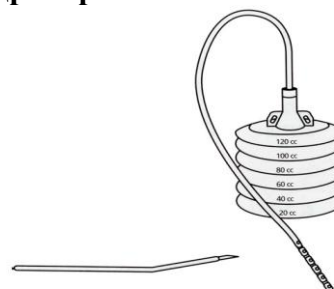

Микро Red-O-Pack Код 624

Для послеоперационного дренирования небольших объемов.

Код 624.26: в набор входит 20мл контейнер, дренаж Fr 06 и игла Алена.

Код 624.58: в набор входит 50мл контейнер, дренаж Fr 08 и игла Алена.

Соединительная трубка для контейнера Red-O-Pack Код 660

Длина 125см. Для использования с контейнером 620.05. PVC трубка.

Код 660.12 для двух Fr 10 или 12 дренажей Redon

Код 660.14 для одного Fr 14 дренажа Redon

Код 660.16 для одного Fr 16 дренажа Redon

Код 660.18 для одного Fr 18 дренажа Redon.

Vydrain 200 с Люер-коннектором. Код 623


Флакон с отрицательным давлением внутри (вакуум) для послеоперационного дренирования.

Вместимость 200мл – начальное разрежение 900 бар – противоударный.

Люер-коннектор и индикатор вакуума.

Код 623.230: Плоский флакон без соединительной трубки.

Код 623.231: Дренажный флакон и соединительная трубка (длина 125см) с универсальным коннектором.

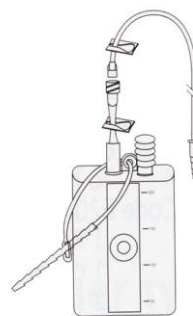

Vydrain 200 Код 623

Флакон с отрицательным давлением внутри (вакуум) для послеоперационного дренирования.

Вместимость 200мл – начальное разрежение 900 бар – противоударный. Простой коннектор и индикатор вакуума.

Код 623.220: Плоский флакон без соединительной трубки.

Код 623.221: Дренажный флакон и соединительная трубка (длина 125см) с универсальным коннектором.

Vydrain 400 с Люер-коннектором Код 623


Флакон с отрицательным давлением внутри (вакуум) для послеоперационного дренирования.

Вместимость 400мл – начальное разрежение 900 бар – противоударный.

Люер-коннектор и индикатор вакуума.

Код 623.430: Плоский флакон без соединительной трубки.

Код 623.431: Дренажный флакон и соединительная трубка (длина 125см) с универсальным коннектором.

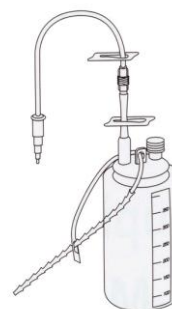

Vydrain 400 Код 623

Флакон с отрицательным давлением внутри (вакуум) для послеоперационного дренирования.

Вместимость 400мл – начальное разрежение 900 бар – противоударный. Простой коннектор и индикатор вакуума.

Код 623.420: Плоский флакон без соединительной трубки.

Код 623.421: Дренажный флакон и соединительная трубка (длина 125см) с универсальным коннектором.

Vydrain 600 с Люер-коннектором Код 623

Флакон с отрицательным давлением внутри (вакуум) для послеоперационного дренирования.

Вместимость 600мл – начальное разрежение 900 бар – противоударный. Люер-коннектор и индикатор вакуума.

Код 623.630: Плоский флакон без соединительной трубки.

Код 623.631: Дренажный флакон и соединительная трубка (длина 125см) с универсальным коннектором



Vydrain 600 Код 623

Флакон с отрицательным давлением внутри (вакуум) для послеоперационного дренирования.

Вместимость 600мл – начальное разрежение 900 бар – противоударный. Простой коннектор и индикатор вакуума.

Код 623.620: Плоский флакон без соединительной трубки.

Код 623.621: Дренажный флакон и соединительная трубка (длина 125см) с универсальным коннектором.

Соединительная трубка для флаконов Vydrain с Люер соединением Код 664.52

Соединительная трубка из PVC, длина 125см.

С универсальным и Люер – коннекторами.

Код 664.53 – Y-образная трубка для 2 дренажей Redon.

Торакальные дренажи

Плевральные дренажи для младенцев код 625, плевральный дренаж Joly код 635 – см. раздел Неонатология

Торакальный дренаж с трокаром Код 626



Прозрачный PVC дренаж с XRO линией – 2 латеральных отверстия. Рукоятка обеспечивает хорошие хватку и контроль введения. Маркировка каждые 2 см со 2 по 14 см (Fr 12 и 16), и каждые 2 см с 2 по 24 см (Fr с 20 по 32).


Fr 12-16: длина **25см**

Fr 20-24-28-32: длина **40см**

Торакальный дренаж с трокаром Код 636

Прозрачный PVC дренаж с XRO линией – 2 латеральных отверстия и фиксационное кольцо. Маркировка на 5, 10 и 15 см от кончика.


Fr 14-18-20-24-28-30: длина **28 см**

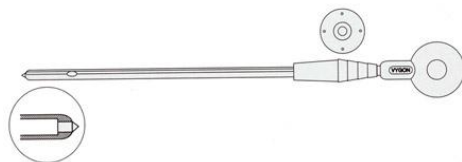

Торакальный дренаж Код 653

Прозрачный PVC дренаж с XRO линией – 6 латеральных отверстий. Атравматичный проксимальный кончик позволяет производить соединение после укорочения. Маркировка каждые 2 см со 2 по 24 см после отверстий.

Fr 16-20-24-28-32: длина **50 см**

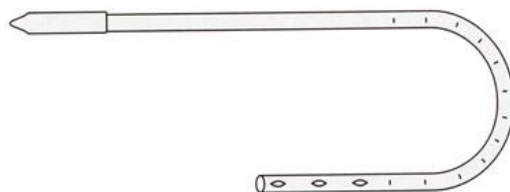

Силиконовый торакальный дренаж Код 2633

Прямой, закругленный кончик. Прозрачный, XRO.

Fr 18-21-24-27-30-33-36: длина **50 см**

Готовый набор для торакального дренирования. Код 639

Код 639.08 педиатрический – дренаж с трокаром **625.08**


Код 639.14 педиатрический – дренаж с трокаром **636.14**

Код 639.18 – дренаж с трокаром **636.18**

Код 639.20 – дренаж с трокаром **636.20**

Код 639.24 – дренаж с трокаром **636.24**

Код 639.28 – дренаж с трокаром **636.28**

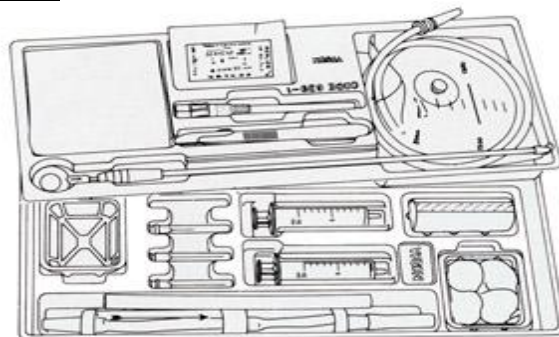

Комплектация набора:

- 1 XRO дренаж с трокаром
- 1 60x50 см перфорированная повязка
- 2 квадратных чашки для моющих и

- 1 38x0,8 мм (21G) игла для местной анестезии
- 1 90x1,2 мм (18G) игла для эксплоративной пункции*

- дезинфицирующих растворов
 - 4 тампона
 - 8 10x10 см марлевых салфеток
 - 2 перевязочных пинцета
 - 2 10 мл шприца
 - 1 38x1.2 мм (18G) игла для набирания лекарств
 - 1 15x0.5 мм (25G) игла для создания «лимонной корки»
 - 2 шовные иглы
 - 1 скальпель
 - 1 двойной клапан для отсоса
 - 1 пластиковый мешок с коннектором для сбора дренированной жидкости
 - 1 катушка лейкопластыря, шириной 75 мм
 - 1 пара перчаток
- * 38x0.9 мм (20G) для кодов 639.08 и 639.14.


Easydrain Код 681

Катетер для дренирования плевральной полости, который находится в установочном рукаве и устанавливается через иглу-интродьюсер. Игла и рукав удаляются; катетер подсоединяется к крану.

Конический адаптер входит в набор для соединения с отсосом или клапаном.

Комплектация набора:


- 1 игла-интродьюсер со встроенным установочным рукавом
- 1 дренаж (PE-XRO)
- 1 3х-путевой кран и дренажный коннектор в силиконовом рукаве
- 1 конический адаптер

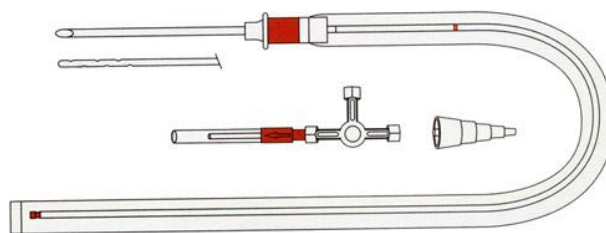


Цветная кодировка по размеру на установочном рукаве и дренажном коннекторе.

Код		Дренаж				Игла		
		Ø Внешн. мм	Ft	Длина см	перфорация	Ø Внешн. мм	G	Длина мм
681.06	»»	2,0	6	30	на 3 см	2,42	13	57
681.082	»»	2,7	8	40	на 4 см	3,32	10	77
681.08	»»	2,7	8	50	на 10 см	3,32	10	77
681.10	»»	3,3	10	50	на 10 см	4,00	8	77

Оди́рный клапан для торакального дренажа, тип Heimlich. Код 669.10

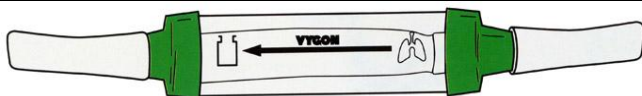

Двойной клапан для торакального дренирования Код 668.00

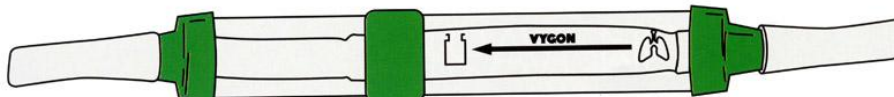

Корпус клапана выполнен из гибкого прозрачного полиуретана с рукавом из натуральной резины в форме «утиный клюв», действующий по типу антирефлюксного клапана.

Данное устройство подключается непосредственно к плевральному или торакальному дренажу пациента (взрослого или ребенка), или опосредованно через коннектор код 800.01 и удлинитель для новорожденных и младенцев.

Позволяет проводить дренирование без риска для пациента даже при транспортировке, т.к. антирефлюксный клапан не требует клипирования дренажа.

Код 668.00: данное двухкамерное устройство отличается от **669.10** возможностью отсасывания **вручную** путем сжатия камеры помеченной стрелкой (вакуум приблизительно 150 мбар)

Адаптер клапана Heimlich Код 800.01

Позволяет подсоединять оди́рный (код **669**) или двойной (код **668**) клапаны к плевральным дренажам новорожденных (код **625**)

